


ConnectClip

Краткое руководство пользователя

СОПРЯЖЕНИЕ CONNECTCLIP СО СЛУХОМ СПИДА

1. Убедитесь, что ConnectClip выключен. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку примерно 6 секунд, пока индикатор питания не погаснет.
2. Выключите оба слуховых аппарата. (Открытый батарейный отсек)
3. Включите оба слуховых аппарата. (Закройте батарейный отсек)
4. Теперь слуховые аппараты готовы. При первом подключении с помощью ConnectClip. Теперь у вас есть 3 минуты, чтобы завершить сопряжение.
5. Включите ConnectClip. Нажмите и удерживайте мульти-кнопку примерно 3 секунды, пока индикатор питания не загорится ГЛАВНЫМ ЗЕЛЕНЫМ.
6. ConnectClip выполнит поиск ваших слуховых аппаратов. Индикатор состояния МИГАЕТ ЖЕЛТЫМ цветом.
7. Поместите ConnectClip и оба слуховых аппарата близко друг к другу (максимальное расстояние 8 дюймов).
8. Установлено соединение со слуховыми аппаратами. Обозначается индикатором состояния ПОСТОЯННО ЖЕЛТЫЙ.

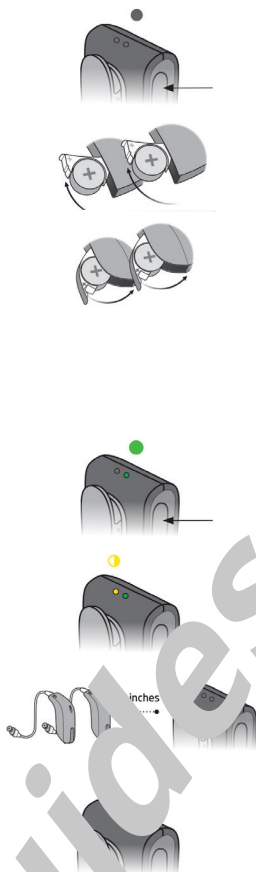

СОПРЯЖЕНИЕ CONNECTCLIP С МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ

1. Выполните сопряжение ConnectClip со слуховыми аппаратами перед сопряжением ConnectClip с мобильным телефоном.
2. Переведите ConnectClip в режим сопряжения. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку И кнопку увеличения громкости около 6 секунд (A), пока не отобразится статус. МИГАЕТ СИНИЙ.
3. Включите сопряжение на мобильном телефоне. Включите Bluetooth. Найдите и подключитесь к / пара с ConnectClip. Обычно это находится в разделе настроек / Bluetooth вашего телефона.
4. Введите свой пин-код. Если ваш телефон запрашивает пин-код, введите 0000 (четыре нуля).
5. Сопряжение завершено. Завершение сопряжения с мобильным телефоном обозначается статусом ПОСТОЯННЫЙ СИНИЙ.



ПРИЕМ ЗВОНКОВ

Телефон подключен: Когда ConnectClip включен и находится в пределах досягаемости вашего мобильного телефона, он автоматически подключается к мобильному телефону. Индикатор состояния Горит СИНИМ цветом.

Телефонный звонок: Когда телефон зазвонит, вы услышите в своих слуховых аппаратах индикатор звонка (и, если он есть, мелодию звонка с телефона). Индикатор состояния будет МИГАТЬ ЗЕЛЕНЫМ.



Ответить на звонок: Либо короткое нажатие мульти-кнопки (A), либо ответьте на звонок со своего мобильного телефона.

Как только вызов будет подключен, статус изменится на УСТОЙЧИВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ.

Завершить звонок: Либо короткое нажатие мультикнопки (A), либо положите трубку с мобильного телефона. Статус НЕПРЕРЫВНЫЙ СИНИЙ.



СЛУШАЯ МУЗЫКУ

При подключении к мобильному телефону или другому сопряженному устройству через Bluetooth музыка, воспроизводимая на телефоне / устройстве, будет автоматически воспроизводиться в ваших слуховых аппаратах. СТАТУС ОРАНЖЕВЫЙ.

Вам не нужно нажимать какие-либо кнопки или что-либо менять в ConnectClip.




УДАЛЕННЫЙ МИКРОФОН

Нажмите и удерживайте мульти-кнопку примерно 3 секунды, чтобы изменить режим. Изменение режима подтверждается звуковой индикацией в ваших слуховых аппаратах. СТАТУС ПУРПУРНЫЙ


См. «Краткое руководство ConnectClip к удаленному микрофону» для получения более подробной информации.

ВАЖНЫЙ: Убедитесь, что микрофон направлен на рот говорящего и что он не закрыт одеждой, шарфом, галстуком и т. Д.

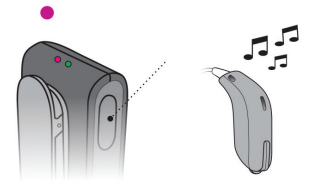

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Когда ConnectClip не передает звук, он служит пультом дистанционного управления для ваших слуховых аппаратов.

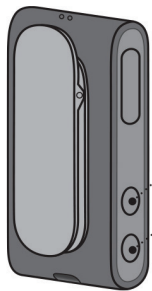

- Увеличить громкость - короткое нажатие
- Звук тише** - короткое нажатие



- Следующая программа - Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для перехода к следующей программе.
 - Отключить слуховой аппарат **микрофоны** - долгое нажатие на кнопку уменьшения громкости
- Короткое нажатие увеличения или уменьшения громкости приведет к включить звук

ВАЖНЫЙ:

При использовании в качестве пульта дистанционного управления максимальная дистанция между **дистанция между** Высота ConnectClip и слуховых аппаратов составляет 6 футов.

Обзор - шаблоны мигания ConnectClip

Положение дел	Описание	
	Мигает желтым	В поисках слуховых аппаратов
	Постоянный желтый	Подключены слуховые аппараты. Не подключен к телефону.
	Мигает синим	Поиск мобильного телефона (сопряжение)
	Постоянный синий	Подключен к мобильному телефону
	Горит зеленым	По звонку
	Мигает зеленым	Входящий звонок
	Постоянный оранжевый	Музыка, Мобильный Телефон
	Постоянный пурпурный	Режим удаленного микрофона
	Мигающий пурпурный	Повторное подключение удаленного микрофона

Власть	Описание	
	Постоянно красный	Низкий заряд батареи
	Горит зеленым	Включил - не заряжается
	Мигает зеленым	Включил - заряжается
	Тускнеющий зеленый	Включен - зарядка завершена
	Мигающий оранжевый	Выключил - заряжается
	Постоянный оранжевый	Выключен - зарядка завершена